


# ANLEITUNG

## PARI TURBOBOY SX – AEROSOLGERÄT

EIGENTÜMERIN: *Die kleine Sportpraxis*

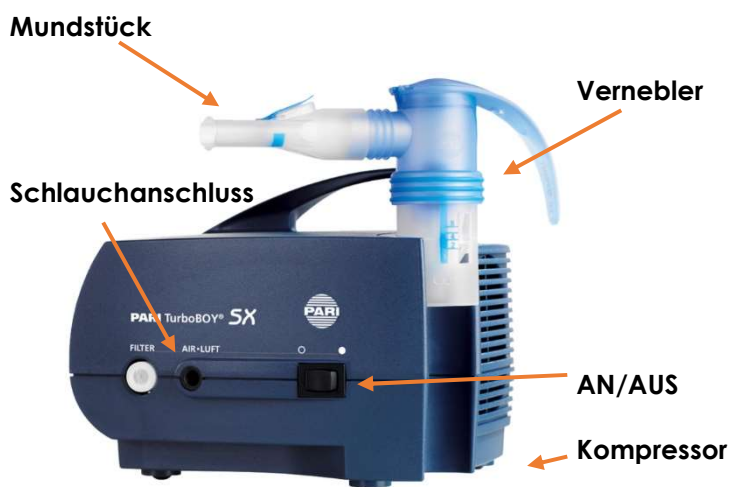

### DAS INHALIEREN

Nehmen Sie sich Zeit zum Inhalieren. Auch an beschwerdearmen Tagen (wie vom Arzt verordnet) **regelmässig** inhalieren.

Inhalieren Sie wenn immer möglich **VOR den Mahlzeiten**.

1.) Die Medikamente in der vom Arzt verordneten exakten Dosierung immer erst unmittelbar vor der Inhalation einfüllen.

2.) **Sitzen** Sie zum Inhalieren **aufrecht und entspannt**; stützen Sie die Füsse, wenn möglich, auf dem Boden auf.

3.) Umschliessen Sie mit den **Lippen** das Mundstück möglichst **dicht**.

4.) Im **normalen Atemrhythmus** durch den Mund **ruhig und ohne Kraft/Druck entspannt** ein- und ausatmen.

Ihr Vernebler ist mit einem Ventilsystem ausgerüstet, das durch den Atemrhythmus gesteuert wird.

Eine Inhalation dauert unter normalen Umständen nicht länger als 10min. Brechen Sie die Inhalation ab, sobald der Nebel nur noch unregelmässig austritt.

Während der Inhalation kann eine sichtbare Feuchtigkeitsablagerung im Verbindungsschlauch entstehen. Diese ist unbedenklich. In diesem Fall ist der Schlauch – nach Entfernen des Verneblers mit Hilfe des Gerätekompressors trocken zu blasen.

## DIE REINIGUNG

Nach der Therapie bleiben Medikamentenreste im Vernebler. Um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden und eine einwandfreie Hygiene sicherzustellen ist der Vernebler **nach jedem Gebrauch** zu reinigen:

- 1.) Vernebler vom Schlauch ziehen und in seine Einzelteile zerlegen.
- 2.) Alle Teile des Verneblers **mit warmem Wasser** und etwas Spülmittel auswaschen und anschliessend mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.
- 3.) Bei Bedarf die Aussenseite des Aerosol-Apparates mit einem feuchten Tuch abwischen. Luftschlauch **nur aussen feucht** abwischen. (**Sollte Feuchtigkeit/Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein**, sorgen Sie bitte vor der Inbetriebnahme für eine ausreichende Trockenzeit.)

### ACHTUNG:

- **Entkalken NUR mit Zitronensaft** (NICHT mit Essig od. anderen Mitteln).
- Teile **NIE feucht** zusammensetzen und/oder lagern.
- **Inhalierende Kinder** nicht unbeaufsichtigt inhalieren lassen. Achtung vor der Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen bei unsachgemässer Verwendung.
- **Ersetzen des Verneblers (inkl. Schlauch)** bei gleichbleibendem Verwender nach 1 Jahr od. bei vorheriger Beschädigung. Filterwechsel durch den Vermieter nach jedem Mieterwechsel.
- **Filterwechsel** nach 200 Inhalationen oder nach einem Mieterwechsel durch den Vermieter.

Das Gerät wird Ihnen in einwandfreiem Zustand übergeben. Größere Schäden am Gerät verpflichten zum Kauf des Gerätes.

Wir danken Ihnen für den achtsamen Umgang mit diesem Gerät.

Herzlichen Dank. *Die kleine Sportpraxis*